

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™

 Dentsply
Sirona

Primescan
Enjoy the scan.




„Was mich motiviert?
Bestmögliche Ergebnisse.
Und Primescan
ist die Lösung.“

„Für mich setzt Primescan neue Standards in der dentalen Scantechnologie. Sowohl mein Team als auch ich finden, dass das intraorale Scannen jetzt genauer, schneller und einfacher ist als je zuvor. Primescan ist einfach in der Handhabung, sofort einsatzbereit und lässt sich nahtlos in unsere Arbeitsabläufe integrieren. Auch meine Patienten profitieren von der herausragenden Leistung, da der Vorgang für sie wesentlich angenehmer ist.“

Dank der modernsten Technologie werden mehr Daten mit einer höheren Auflösung erfasst und schnell verarbeitet, mit perfekter Schärfe und herausragender Präzision. Dies ermöglicht vielfältige Indikationen, vom einzelnen Zahn bis zum Vollkiefer. Und aufgrund der erweiterten Konnektivitäts-Optionen ist es ganz einfach, meine Praxis mit unserem Labor und anderen Partnern zu verbinden. Also kann ich nur sagen, probieren Sie es selbst aus – viel Spaß beim Scannen!“

Dr. Verena Freier
Zahnärztin



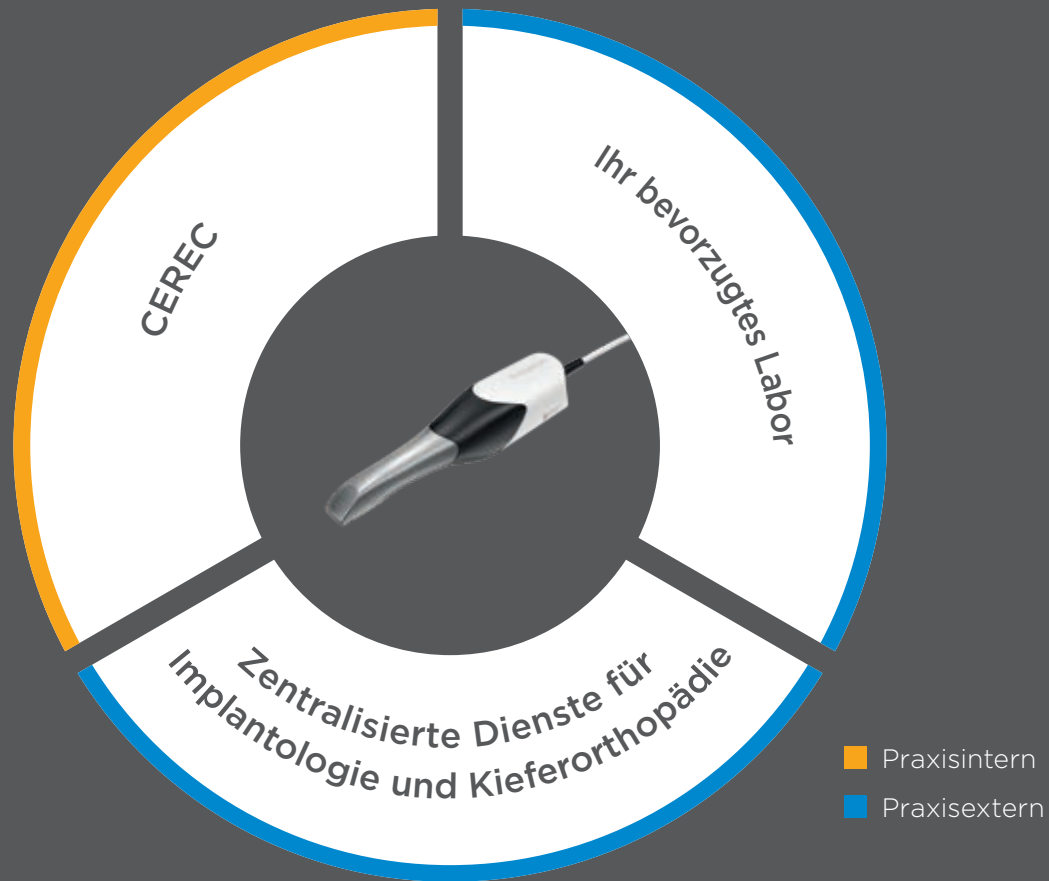

Profitieren Sie von Rundum-Zufriedenheit

Eine hervorragende Wahl für herausragende Ergebnisse: Primescan ist der perfekte Einstieg in die digitale Zahnmedizin. Egal wie Sie Ihre Arbeitsabläufe gestalten möchten, Primescan ermöglicht effiziente digitale Workflows – sowohl chairside in Ihrer Praxis als auch in Zusammenarbeit mit Ihren bevorzugten Partnern.

Martin Wohanka
Hardware-Ingenieur



Genauigkeit

Die neue Primescan bietet nicht nur einen neuen Ansichtspunkt, sondern eine Million:

Der innovative Smart Pixel Sensor verarbeitet mehr als 1.000.000 3D-Punkte pro Sekunde und produziert so fotorealistische und hochpräzise Daten. Primescan gilt in bestimmten Aspekten als der genaueste unter den getesteten intraoralen Scannern, die in einer In-vitro-Studie* verglichen wurden. Die dynamische Tiefenscantechnologie ermöglicht perfekte Schärfe und herausragende Präzision, selbst bei einer Messtiefe bis zu 20 mm – ein absoluter Vorteil für tiefergelegene Indikationen.

Sie bekommen genau das, was Sie sehen:

Dank der Fähigkeit von Primescan, mit einer unglaublichen Datendichte zu scannen, liefert sie komplette 3D-Strukturen von allen im Sichtfeld liegenden Bereichen, und das schon direkt beim ersten Scan.

Perfekte Schärfe
bis zu
20 mm Tiefe

Verarbeitung
von mehr als
1 Million
3D-Punkte pro
Sekunde

*Ender et al, Accuracy of complete- and partial-arch impressions of actual intraoral scanning systems in-vitro, Int J Comput Dent 2019; 22(1); 11-19; in der Vergleichsgruppe der Intraoralscanner, die einige heute im Handel erhältliche Systeme nicht abdeckt, zeigte Primescan die besten Median- und Mittelwerte über den Gesamtkiefer und den vorderen und hinteren Teilkieferbereich, wenige statistische Einschränkungen gelten.

Einfaches Scannen

von steilen
Oberflächen

Für alle
**relevanten
Desinfektions-
prozesse**

Benutzerfreundlichkeit

Genießen Sie die Freiheit, die das Scannen bietet: Primescan ermöglicht es Ihnen, sofort mit dem Scannen zu beginnen. Die kontinuierliche Selbsterwärmung sorgt dafür, dass Sie mit Primescan jederzeit einsatzbereit sind. Steile Winkel? Schwer zu erreichende Bereiche? Glänzende Materialien? Ein Kinderspiel für Primescan. Dank des erweiterten Sichtfelds können Sie größere Bereiche mit weniger Schwüngen und sofortiger Präzision visualisieren. Die ausgezeichneten Scanergebnisse werden sofort auf dem Touchscreen der neuen Aufnahmeeinheit angezeigt.

Halten Sie Infektionen unter Kontrolle: Durch eine Auswahl von drei verschiedenen Hülsen wird sichergestellt, dass sowohl Ihre Praxisbedürfnisse als auch alle allgemeinen Hygieneanforderungen erfüllt werden. Sie haben die Wahl zwischen Edelstahlhülsen mit Saphirglas und der autoklavierbaren Variante. Einweghülsen zur einmaligen Verwendung sind ebenso erhältlich.




Schnelligkeit

Beschleunigen Sie das Verfahren: Die einzigartige Technologie von Primescan ermöglicht ein leichtes Erfassen und eine schnellere Verarbeitung von mehr Daten mit einer höheren Auflösung. Die intelligente Datenverarbeitung in Primescan sorgt für eine optimale Interaktion mit der Software, indem sie genau die Daten überträgt, die die Software benötigt, um fortzufahren. Das Ergebnis: Komplette 3D-Modelle werden sofort angezeigt, unabhängig davon, wie schnell Sie scannen.

Erweitern Sie Ihre Konnektivitäts-Optionen: Dank der nahtlosen, validierten und offenen Datenübertragungsoptionen erhalten Labore und andere Partner im Handumdrehen hochauflösende Modelle. Mit Primescan kommen Sie in den Genuss der Möglichkeit, die besten Arbeitsabläufe für Sie und Ihre Patienten auszuwählen.

Dr. Teena Steger
Software-Entwicklerin

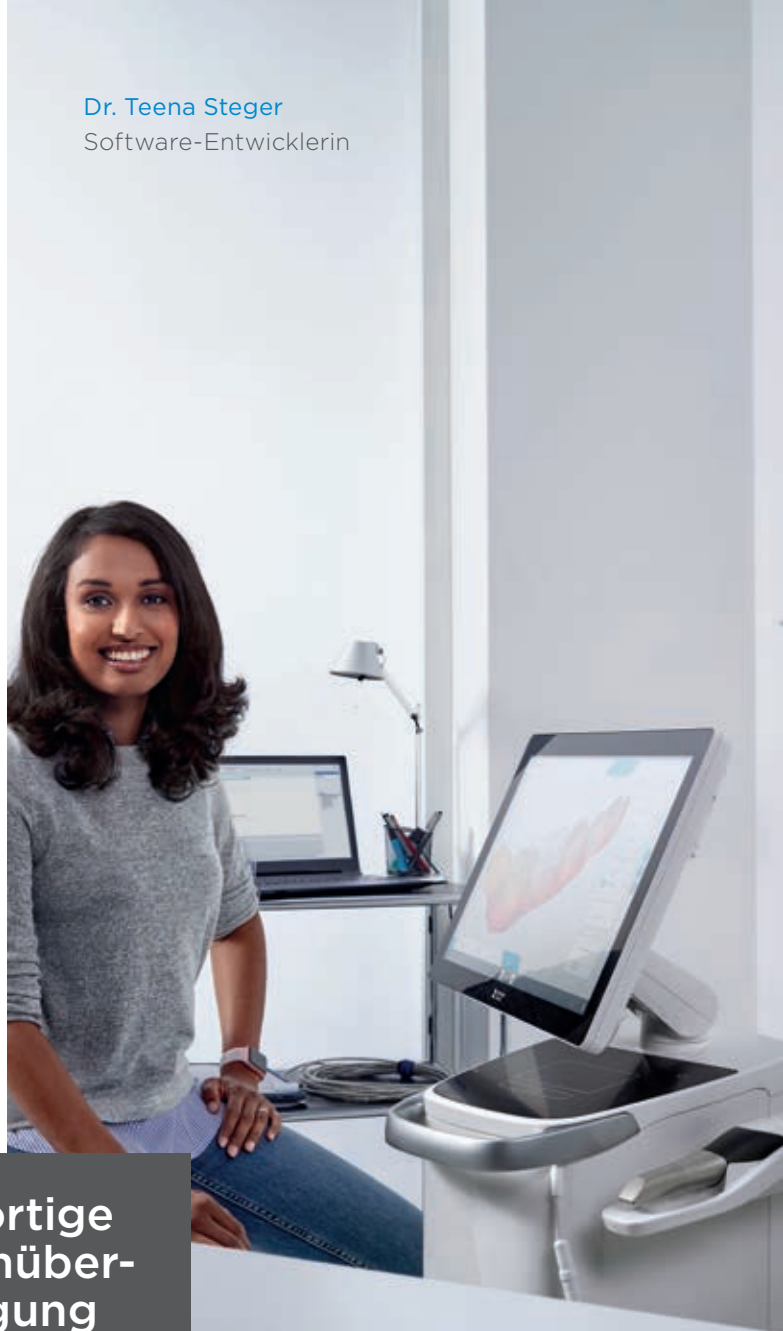

Konsolidierung
von mehr als
**50.000
Bildern**
pro Sekunde

**Sofortige
Datenüber-
tragung**
an externe
Partner

Beeindruckende Details: Die neue Aufnahmeeinheit

Die neue Aufnahmeeinheit ist eine Arbeitsstation für moderne Zahnheilkunde, die die Bedürfnisse der Zahnärzte berücksichtigt. Mit ihrem Touchpad und dem beweglichen Breitbild-Touchscreen (16:9) bietet sie eine hochintuitive und ergonomische Arbeitsfläche.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- **Touchscreen & Touchpad** bieten eine komfortable, intuitive Bedienung
- **Kinematik** zur perfekten ergonomischen Positionierung
- **Cleveres Hygienekonzept** zur schnellen und einfachen Desinfektion
- **Mobilitätskonzept** für volle Mobilität mit einem Batteriespeicher von mehr als 60 Minuten



Die beste Wahl für Ihre Praxis – Primescan bietet **zwei individuelle Softwarekonfigurationen, um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden:**

Primescan AC mit Connect Software:

- Unterstützt Datenübertragungsoptionen an Ihre bevorzugten Partner
- Sichere und verschlüsselte Datenübertragung über die Connect Case Center Inbox
- Kann leicht auf vollständigen Chairside-Arbeitsablauf umgerüstet werden
- Touch-fähige und intuitive Benutzeroberfläche

CEREC Primescan AC mit CEREC Software:

- Unterstützt vollständige Chairside-Arbeitsabläufe für dentale Behandlungen in nur einer Sitzung
- Flexible Datenexportoptionen
- Automatisierter Arbeitsablauf basierend auf künstlicher Intelligenz
- Touch-fähige und intuitive Benutzeroberfläche

Dentsply Sirona

Dentsply Sirona Deutschland GmbH
Fabrikstraße 31, 64625 Bensheim, Deutschland
dentsplysirona.com

Procedural Solutions

Preventive
Restorative
Orthodontics
Endodontics
Implants
Prosthetics

Enabling Technologies

CAD/CAM
Imaging
Treatment Centers
Instruments

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™

